

GlucoMen[®] areo: краткая инструкция по эксплуатации

Как измерить уровень сахара в крови:



Введите новую тест-полоску GlucoMen[®] areo в глюкометр сверху.



Возьмите каплю крови для анализа.




Нанесите каплю крови на конец тест-полоски.



Спустя 5 секунд на экран будет выведен результат замера.



Нажмите клавишу выброса, чтобы стерильно удалить тест-полоску.

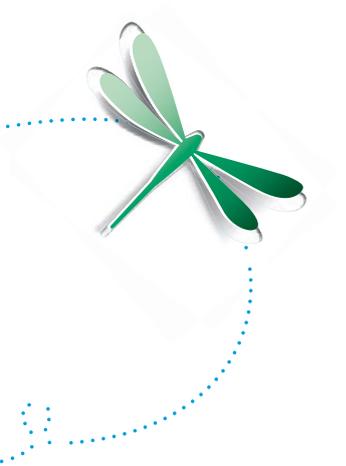


GlucoMen® areo – signaler display

Сигнал


Значение

Ваши действия

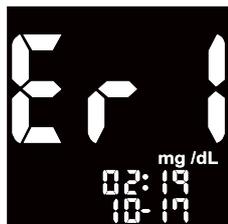


Ошибка системной программы

Обратитесь в отдел обслуживания клиентов по тел. +49 - 800 - 45 82 66 36 (бесплатный)

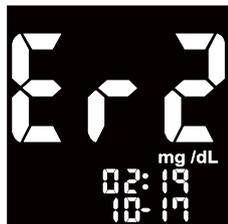


Тест-полоска повреждена или уже использовалась

Повторите тест, используя новую тест-полоску

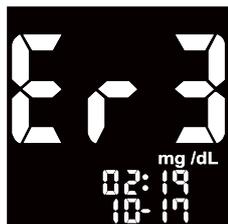

Ошибка пробы крови

Повторите тест, нанеся на новую тест-полоску чуть больше крови

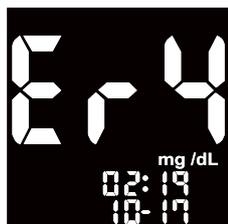

Тест-полоска была удалена слишком рано

Повторите тест, используя новую тест-полоску



Ближняя бесконтактная связь (NFC) была прервана

Повторите передачу данных

