



GlucoMen[®] areo 2K

QuickGuide



OBS! Dette er en kortfattet quickGuide. Detaljeret information finder du i brugsanvisningen som følger med din blodsukker- og ketonmåler.


Læs mere på: www.areo.nu/da

Sådan måler du blodsukker og ketoner.

Tid og dato er forudindstillet, men kontrollér at de stemmer første gang du anvender måleren.

1. Vask hænder med sæbe og vand.
2. Tag en blodsukker- eller β -keton stimmel fra beholderen og luk hættten med det samme.
3. Før den ende af teststrimlen, som har en metallisk overflade, ind i målerens åbning.
4. Måleren viser en blinkende bloddråbe "Glu" eller "KET" i nederste venstre hjørne, og er nu klar til måling.
5. Stik med fingerprikkeren.
6. Påfør bloddråben for enden af teststrimlen, som absorberer den rette mængde blod. Der lyder et bip, og nedtællingen begynder på displayet.
7. Aflæs værdien. Der lyder et bip (hvis aktiveret), når resultatet vises på skærmen (efter 5 sekunder for blodsukker- og efter 8 sekunder for β -keton strimmel).
8. Tryk på udløserknappen for at skubbe den brugte teststrimmel ud. Måleren slukker automatisk.

3.

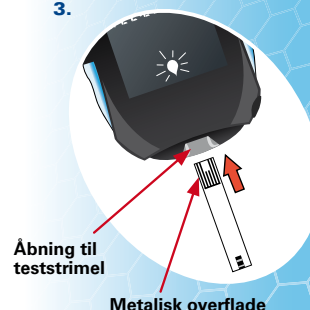

6.



Markering af blodsukkerværdien.

1. Når din blodsukkerværdi vises, skal du trykke på , indtil makeringssymbolet blinker. Med piletasterne   vælg den ønskede makering  (før måltid),  (efter måltid),  (fysisk aktivitet) eller  (kontrol).
2. Bekræft din markering ved at trykke på -tasten. Du kan vælge flere markeringer (men kun 1 når du vælger  eller  ved at gentage trin 1 og 2).

Hvordan indstiller du tid og dato.

1. Sørg for at måleren er slukket. (Hvis ikke, tryk på  i 3 sekunder).
2. Tryk på  i 4 sekunder for at komme ind i indstillingsmenuen.
3. Tryk på  eller  for at bladre indstillingsmenuen igennem, tryk på  for at gå ind i hver enkel menu.
4. Brug  eller  for at vælge værdien. Tryk på  for at bekræfte og gå til næste trin: år, måned, dag, tidsformat, time, minutter.
5. Efter bekræftelse af minutterne (ved at trykke på ) kommer du tilbage til indstillingsmenuen.

Hvordan finder du de gemte målinger.

Måleren gemmer op til 730 resultater med dato, tid og markeringer.

1. Sørg for, at måleren er slukket. (Hvis ikke, tryk på  i 3 sekunder)
2. Tryk på  2 sekunder for at starte ("mem" vises på skærmen).
3. De seneste testresultater med den tid, dato og markeringer vises.
4. Tryk på  eller  for at bladre igennem de gemte data.
5. Tryk på  i 3 sekunder for at slukke måleren.

Se gennemsnits værdierne for 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dage.

1. Tryk på  i 2 sekunder for at tænde måleren. Tryk på  igen ("AVG" vises på skærmen). Måleren viser dagens gennemsnit.
2. Fortsæt med at trykke på  for at få vist gennemsnittet for 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dage.
3. Tryk på  for mere end 3 sekunder for at slukke målerne.

GlucoMen[®] areo 2K

On/off/enter
knap



Teststrimmel
åbning



Op/ned
knapperne





Trådløs overførsel via NFC (Near Field Communication)

Dine gemte målinger kan overføres til en NFC-aktiveret enhed (smartphone og/eller tablet) med en NFC-kompatibel app installeret (f.eks. GlucoLog).

Første gang må du aktivere din målers NFC-funktion (findes i indstillingsmenuen) ved at trykke på ▲ eller ▼ for at vælge ON eller OFF.

Tryk på for at bekræfte.

1. Aktiver NFC- overførsel på din smartphone under indstillinger.
2. Placer måleren tæt på din smartphone (<1 cm).
3. Måleren starter automatisk og data overføres (N) blinker på skærmen).
4. Når overførslen af data er afsluttet, vises "End" på skærmen samme med symbolet (N), og der lyder et bip.
5. Tryk på i 3 sekunder for at slukke måleren.

Sådan skifter du batterierne i GlucoMen® Areo.


Din måler bruger to CR2032 3V batterier. Når symbolet for lavt batteri lyser, er det tid til at skifte. Du behøver ikke at indstille dato og tid, hvis du sætter batterierne i inden 2 minutter efter at have fjernet de gamle. Hvordan gør du:

1. Tjek at måleren er slukket.
2. Åbn batteridækslet på bagsiden af måleren og fjern batterierne.
3. Sæt de nye batterier i batteriholderen med "+" vendt opad.
4. Luk batteridækslet.




Sådan anvendes fingerprikkeren GlucoJect Dual PLUS®


1. Vask dine hænder eller alternativt teststed (AST). Skru spidsen af fingerprikkeren ved at dreje den modsat uret.

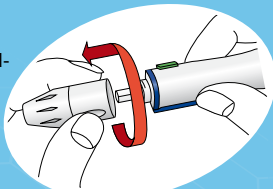

2. Indsæt en ny steril lancet helt ind i bunden af lancetholderen.

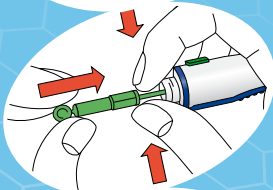


3. Indstil stikkedybden ved at dreje spidsen. 1-2 for blød eller tynd hud, 3 til normal hud, 4-5 for tyk eller hærdet hud.

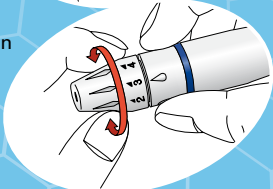


ADVARSEL! Brug ALDRIG lancetten til mere end en person. Anvend en ny lancet for hver måling og efterlad ikke den brugte lancet i fingerprikkeren.

4. Træk gliderøret tilbage for at lade fingerprikkeren. Hold fingerprikkeren mod fingeren og tryk på udløserknappen.

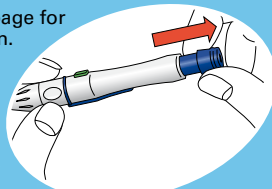


5. Tryk lancetejektoren frem med tommelfingeren, samtidig træk gliderøret tilbage for at kassere den brugte lancet.

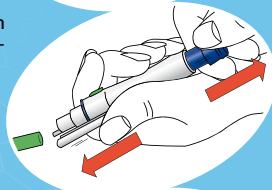

Alternative teststeder

Placer fingerprikkeren på huden på det udvalgte stik område. Tryk ned og hold i et par sekunder, tryk derefter på udløserknappen for at tage en blodprøve.

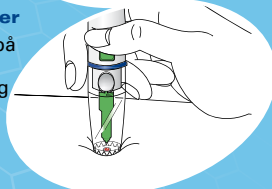

Fejlkode og meddelelser

ER1 Systemfejl hardware. Fjern og isæt batterierne igen, og gentag testen med en ny teststrimmel. Fortsætter fejlmeldingen, skal du kontakte kundeservice.

ER2 Teststrimmel er beskadiget eller brugt, eller har fået blodet påført før "bloddråbe symbolet" begyndte at blinke på skærmen. Vent til dråbe ikonet blinker, før du starter. Gentag testen med en ny strimmel.

ER3 Teststrimmel fik for lille mængde blod. Stik dig igen og gentag testen med en ny teststrimmel og den rigtige mængde blod.

ER4 Teststrimmel blev fjernet eller forsyret under nedtællingen. Gentag testen med en ny teststrimmel.

ER5 NFC afbrudt under overførslen. Gentag NFC overførsel. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.

HI Din blodsukkerværdi er højere end 33,3 mmol/L!

LO Din blodsukkerværdi er lavere end 1,1 mmol/L!

HI (Blinker) Din målte β -keton værdi højere end 8 mmol/L!

LO (Blinker) Din målte β -keton værdi er lavere end 0,1 mmol/L, hvilket er normalt.

ADVARSEL! Hvis HI eller LO vises, skal du kontakte din læge/sygeplejerske, før du ændrer din behandling. Hvis HI eller LO vises gentagne gange, selvom dit blodsukker ikke er højt eller lavt, kontakt kundeservice.

GlucoMen®
areo 2K



Kundeservice: 4220 2051 Hjemmeside: www.areo.nu/da

Medeon Science Park Per Albin Hanssons väg 41, hus D SE-205 12 Malmö
Tel +46 40 32 12 70 Fax +46 40 32 12 71 www.menariniagnostics.se

A.MENARINI
diagnostics