



GlucoMen[®] areo 2K

Hurtigguide




NB! Dette er en rask guide. Detaljert informasjon finner du i bruksanvisningen som følger med måleren..

Slik måler du blodsukkeret / ketonverdien.

Tid og dato er forhåndsinnstilt, men pass på at de er riktige første gang du bruker måleren.

1. Vask hendene med såpe og vann.
2. Ta en glukose- eller β -keton testpinne ut av glasset og legg umiddelbart på lokket igjen.
3. Sett inn enden av teststrimmelen som har en metallisk kontaktflate, i måleråpningen.
4. Måleren viser en blinkende bloddråpe og "Glu" eller "Ket" i nedre venstre hjørne og er nå klar til måling.
5. Hold deg til prøvetakeren.
6. Plasser blodråpen mot den korte enden av pinnen, som vil absorbere riktig mengde blod. Et pip høres og en nedtelling starter på skjermen.
7. Les testresultatene. Et pip høres når resultatet vises på skjermen. (etter 5 sekunder for blodsukker og 8 sekunder for β -ketonpinner)
8. Trykk på utløserknappen for å fjerne den brukte testpinnen. Måleren slås av automatisk.



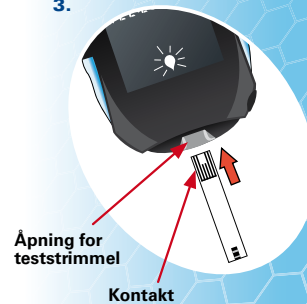







3.












6.

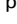

Slik kan du velge en beregning




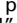

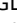

1. Når testresultatet vises, trykker du på  til markeringssymbolene begynner å blinke. Bruk pilknappene ( ) for å velge ønsket valg  før måltid,  (etter måltid),  (trening) eller  (generelt).
2. Bekreft valget ved å trykke på -knappen. Du kan velge flere valg (men bare ett når du velger  eller ) til for å gjenta trinn 1 og 2.

Slik angir du tid og dato på måleren din.





1. Forsikre deg om at måleren er slått av. (Hvis ikke, trykk  i 3 sekunder).
2. Trykk på  i 4 sekunder for å få tilgang til konfigurasjonsmenyen.
3. Trykk på  eller  for å bla gjennom konfigurasjonsmenyene og trykk  for å få tilgang til de forskjellige menyene.
4. Bruk  eller  for å velge verdien. Trykk på  for å bekrefte og gå videre til neste trinn: år, måned, dag, tidsformat, time, minutter.
5. Etter å ha bekreftet minuttene (ved å trykke på ) vil du gå tilbake til innstillingsmenyen.

Hvordan håndtere måleresultater i minnet.

Måleren din sparer opptil 730 blodsukkerverdier og 100 β -ketonverdier med dato, tid og markeringer.

1. Forsikre deg om at måleren er slått av. (Hvis ikke, trykk  i 3 sekunder).
2. Trykk på  i 2 sekunder for å starte ("mem" vises på skjermen og "GLU" blinker).
3. Trykk på  for å se lagrede blodsukkerverdier, eller bla med  og  for å bytte til lagrede β -ketonverdier. Når "KET" blinker på skjermen, bekreft med .
4. Trykk på  i mer enn 3 sekunder for å slå av måleren.

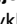Se gjennomsnittlige blodsukkerverdier i 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dager.

1. Trykk på  i 2 sekunder for å slå på måleren. Trykk på  igjen ("AVG" vises på skjermen). Måleren viser dagens gjennomsnitt.
2. Fortsett å trykke på  for å vise kuttet i 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dager.
3. Trykk på  i mer enn 3 sekunder for å slå av måleren.

GlucoMen[®] areo 2K

Knapp for On/Off/Enter

Åpning for teststrimmel



Opp/ned-knapper



Trådløs overføring via NFC (Near Field Communication)

Dine lagrede testresultater kan overføres til en NFC-utstyrt enhet (f.eks. en smarttelefon) med en NFC-kompatibel app installert (f.eks. GlucoLog).

For første gang må du aktivere målerens NFC-funksjon (du finner den i oppsettmenyene) ved å trykke på ▲- eller ▼-knappen for å velge PÅ eller AV. Trykk på ⏻ for å bekrefte og la være.

1. Aktiver NFC-overføringen i appen på smarttelefonen.
2. Plasser måleren din rygg mot ryggen med smarttelefonen (<1 cm).
3. Måleren starter automatisk og data overføres (N) blinker på skjermen).
4. Når dataoverføringen er fullført, vises "End" på skjermen sammen med symbolet (N), og det høres et pip.
5. Trykk på ⏻ i 3 sekunder for å slå av måleren.

Slik bytter du batteriet i GlucoMen® Areo 2K.

Måleren drives av to CR2032 3V-batterier. Når symbolet med lite batteri er på, er det på tide å skifte. Du trenger ikke å angi dato og klokkeslett hvis du setter inn nye batterier innen 2 minutter etter at du har fjernet de gamle. Slik gjør du:


1. Forsikre deg om at måleren er slått av.
2. Fjern måleren forsiktig fra posen.
3. Åpne batteridekselet på baksiden av måleren og fjern batteriene.
4. Sett de nye batteriene inn i batteriholderen med "+" -siden opp.
5. Lukk batteridekselet ved å skyve det tilbake (ikke skyv).

GlucoMen®
areo 2K




Hvordan bruke prøvetakeren GlucoJect Dual PLUS®


1. Vask hendene eller et annet stikksted. Skru av prøveuttaket ved å vri det mot klokken.

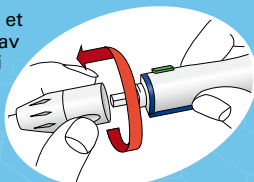

2. Sett en ny steril lansett i lancetten holderen og skyv den helt inn.

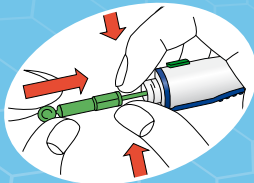


3. Still strikkedybden ved å vri spissen. 1-2 for myk eller tynn hud, 3 for normal hud, 4-5 for tykk eller herdet hud.

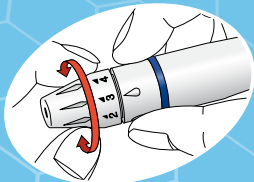


ADVARSEL! Bruk ALDRI samleren til mer enn en person. Ta en ny lansett for hver prøvetaking og Ikke bruk brukt lancet i prøvetakeren.

4. Trekk ut skyvehylsen for å laste inn prøvetakeren. Hold prøvetakeren mot fingeren og trykk på utløserknappen.

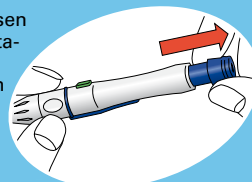


5. Skyv lancet-ejektoren fremover med tommelen mens du trekker ut glidehylsen for å kaste den brukte lansetten.

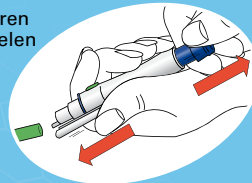

Alternativt strikkeplass

Plasser prøvetakeren på huden på det valgte strikkeområdet. Hold inne noen sekunder, og trykk deretter utløserknappen for å ta en blodprøve.

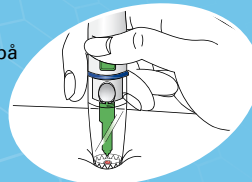

Feilkoder og meldinger

ER 1 Systemfeil maskinvare. Fjern og sett inn batteriene igjen, og gjenta testen med en ny teststrimmel. Hvis feilkoden forblir, kan du kontakte kundeservice.

ER 2 Teststrimmelen er skadet eller brukt, eller blodprøven har blitt brukt før bloddråpsymbolet begynte å blinke på skjermen. Gjenta testen med en ny strikk.

ER 3 Teststrimmelen fikk for lite blod. Hold deg fast igjen for å gjenta testen med en ny teststrimmel og riktig mengde blod.

ER 4 Teststrimmelen ble fjernet eller forstyrret under nedtellingen. Gjenta testen med en ny teststrimmel.

ERS NFC ble koblet fra under overføringen. Gjenta NFC-sendingen. Hvis problemet vedvarer, kontakt kundeservice.

HI Den målte blodsukkerverdien er høyere enn 33,3 mmol/l!

LO Den målte blodsukkerverdien din er lavere enn 1,1 mmol/l!

(Blinkende) **HI** Den målte β -ketonverdien er høyere enn 8 mmol/l!

(Blinker) **LO** Ingen handling er nødvendig. Din målte β -ketonverdi er lavere enn 0,1 mmol/l, noe som er normalt.

ADVARSEL! Hvis HI eller LO vises, må du kontakte helsepersonell før du endrer behandling. Hvis HI eller LO vises gjentatte ganger, selv om blodsukkerverdiene ikke er høye eller lave, må du kontakte kundeservice.

Kundeservice: 040-32 12 70 info@menariniagnostics.se

GlucoMen®
areo 2K



www.areo.nu
shop.menariniagnostics.se

2017-10 GlucoMen Areo 2K Quick guide A4 - NO