



# GlucoMen<sup>®</sup> areo 2K

## Kurzanleitung



**ACHTUNG!** Dies ist eine kurze Kurzanleitung. Detaillierte Informationen finden Sie in der mit dem Messgerät gelieferten Bedienungsanleitung.

### So messen Sie Ihren Blutzucker-/Ketonwert.

Uhrzeit und Datum sind voreingestellt. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie das Messgerät zum ersten Mal verwenden.

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife.
2. Nehmen Sie einen Glukose- oder  $\beta$ -Keton-Teststreifen aus dem Glas und setzen Sie den Deckel sofort wieder auf.
3. Führen Sie das Ende des Teststreifens mit einer metallischen Kontaktfläche in die Messöffnung ein.
4. Das Messgerät zeigt einen blinkenden Blutstropfen und "Glu" oder "Ket" in der unteren linken Ecke und ist jetzt zur Messung bereit.
5. Halten Sie sich an den Sampler.
6. Platzieren Sie den Blutstropfen gegen das kurze Ende des Stäbchens, um die richtige Menge Blut aufzusaugen. Auf dem Bildschirm ertönt ein Piepton und ein Countdown beginnt.
7. Lesen Sie die Testergebnisse. Ein Piepton ertönt, wenn das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird. (nach 5 Sekunden für Blutzucker und 8 Sekunden für  $\beta$ -Ketonstifte)
8. Drücken Sie die Auswurf-taste, um den verwendeten Teststab zu entfernen. Das Messgerät schaltet sich automatisch aus.

3.



Öffnung für  
Teststreifen  
Kontakt-Oberfläche

6.



### So können Sie eine Metrik auswählen

1. Wenn Ihr Testergebnis angezeigt wird, drücken Sie , bis die Markierungssymbole angezeigt werden beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Pfeiltasten (, ) um die gewünschte Auswahl auszuwählen ( (vor dem Essen),  (nach dem Essen),  (Übung) oder  (allgemein).
2. Drücken Sie die -Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Sie können mehrere Auswahlen auswählen (aber nur eine, wenn Sie  oder  auswählen), indem Sie die Schritte 1 und 2 wiederholen.

### Uhrzeit und Datum einstellen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Messgerät ausgeschaltet ist. (Wenn nicht, drücken Sie 3 Sekunden lang )
2. Drücken Sie 4 Sekunden lang  um auf das Setup-Menü zuzugreifen.
3. Drücken Sie  oder  um durch die Setup-Menüs zu blättern, und drücken Sie  um auf die verschiedenen Menüs zuzugreifen.
4. Verwenden Sie  oder , um den Wert auszuwählen. Drücken Sie , um zu bestätigen und zum nächsten Schritt überzugehen: Jahr, Monat, Tag, Zeitformat, Stunde, Minuten.
5. Nach Bestätigung der Minuten (durch Drücken von ) kehren Sie zum Einstellungs-menü zurück.

### So verwalten Sie Messergebnisse im Speicher.

Ihr Messgerät speichert bis zu 730 Blutzuckerwerte und 100  $\beta$  Ketonwerte mit Datum, Uhrzeit und Markierungen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Messgerät ausgeschaltet ist. (Wenn nicht, drücken Sie 3 Sekunden lang )
  2. Drücken Sie zum Starten 2 Sekunden lang  ("mem" erscheint auf dem Bildschirm und "GLU" blinkt).
  3. Drücken Sie  um die gespeicherten Blutzuckerwerte anzuzeigen, oder scrollen Sie mit  und , um zu den gespeicherten  $\beta$ -Ketonwerten zu wechseln. Wenn "KET" auf dem Bildschirm blinkt, bestätigen Sie mit .
  4. Drücken Sie  länger als 3 Sekunden, um das Messgerät auszuschalten. Zeigen Sie die durchschnittlichen Blutzuckerwerte für 1, 7, 14, 30, 60 oder 90 Tage an.
1. Drücken Sie 2 Sekunden lang  um das Messgerät einzuschalten. Drücken Sie erneut  (auf dem Bildschirm wird „AVG“ angezeigt). Der Zähler zeigt den heutigen Durchschnitt.
  2. Drücken Sie weiterhin , um den Schnitt 1, 7, 14, 30, 60 oder 90 Tage lang anzuzeigen.
  3. Drücken Sie  länger als 3 Sekunden, um das Messgerät auszuschalten.

GlucoMen<sup>®</sup>  
areo 2K

Ein/Aus/  
Eingabetaste

Öffnung für  
Teststreife



Auf/Ab-  
Tasten



## Drahtlose Übertragung über NFC (Near Field Communication)

Ihre gespeicherten Testergebnisse können mit einer installierten NFC-kompatiblen App (z. B. GlucoLog) auf ein mit NFC ausgestattetes Gerät (z. B. ein Smartphone) übertragen werden.

Zum ersten Mal müssen Sie die NFC-Funktion Ihres Messgeräts aktivieren (Sie finden sie in den Setup-Menüs), indem Sie die ▲- oder ▼-Taste drücken, um EIN oder AUS auszuwählen. Drücken Sie **U**, um zu bestätigen und zu verlassen.

1. Aktivieren Sie die NFC-Übertragung in der App auf Ihrem Smartphone.
2. Platzieren Sie Ihr Messgerät Rücken an Rücken mit Ihrem Smartphone (<1 cm).
3. Das Messgerät startet automatisch und die Daten werden übertragen (**N**) blinkt auf dem Bildschirm).
4. Wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm zusammen mit dem Symbol **N**) „Ende“ angezeigt und ein Piepton ertönt.
5. Drücken Sie 3 Sekunden lang **U**, um das Messgerät auszuschalten.

## So ersetzen Sie die Batterie in GlucoMen® Areo 2K.

Das Messgerät wird von zwei CR2032 3V-Batterien gespeist. Wenn das Symbol  für niedrigen Batteriestand leuchtet, ist es Zeit zu ändern. Sie müssen Datum und Uhrzeit nicht einstellen, wenn Sie innerhalb von 2 Minuten nach dem Entfernen der alten Batterien neue Batterien einlegen. So geht's:

1. Stellen Sie sicher, dass das Messgerät ausgeschaltet ist.
2. Nehmen Sie das Messgerät vorsichtig aus dem Beutel.
3. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Messgeräts und entfernen Sie die Batterien.
4. Legen Sie die neuen Batterien mit der Seite „+“ nach oben in den Batteriehalter ein.
5. Schließen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie sie zurückschieben (nicht drücken).


**GlucoMen®**  
**areo 2K**

Auswurfaste Antenne (NFC)




## Verwendung des GlucoJect Dual PLUS®-Samplers

1. Waschen Sie Ihre Hände oder stricken Sie abwechselnd. Schrauben Sie die Probenahmespitze ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

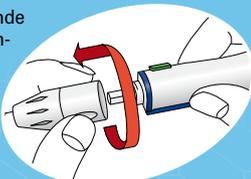

2. Führen Sie eine neue sterile Lanzette in den Lanzettenhalter ein und drücken Sie sie vollständig hinein.

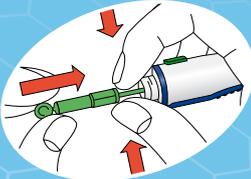


3. Stellen Sie die Stricktiefe durch Drehen der Spitze ein. 1-2 für weiche oder dünne Haut, 3 für normale Haut, 4-5 für dicke oder verhärtete Haut.




**ACHTUNG!** Verwenden Sie den Sampler NIEMALS länger als eine Person. Nehmen Sie für jede Probe eine neue Lanzette und lassen Sie die gebrauchte Lanzette nicht im Probenehmer.

4. Ziehen Sie die Schiebehülse heraus, um den Probenehmer zu laden. Halten Sie den Sampler gegen Ihren Finger und drücken Sie den Auslöser.

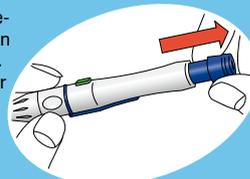


5. Schieben Sie den Lanzettenauswerfer mit Ihrem Daumen nach vorne, während Sie den Schieber herausziehen, um die gebrauchte Lanzette zu entsorgen.

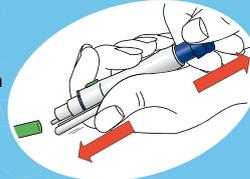

### Alternativer Probenahmepunkt

Legen Sie den Sampler auf die Haut im ausgewählten Strickbereich. Halten Sie einige Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann den Auslöser, um eine Blutprobe zu entnehmen.

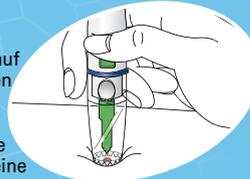

## Fehlercodes und Meldungen

- ER 1** Hardware für Systemfehler. Entfernen Sie die Batterien, legen Sie sie wieder ein und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Wenn der Fehlercode weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- ER 2** Der Teststreifen ist beschädigt oder wird verwendet oder der Bluttest wurde durchgeführt, bevor das Blutstropfensymbol auf dem Bildschirm zu blinken begann. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Strick.
- ER 3** Der Teststreifen erhielt zu wenig Blut. Halten Sie sich erneut fest, um den Test mit einem neuen Teststreifen und der richtigen Menge Blut zu wiederholen.
- ER 4** Der Teststreifen wurde während des Countdowns entfernt oder unterbrochen. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen.
- ER 5** NFC wurde während der Übertragung getrennt. Wiederholen Sie die NFC-Übertragung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- HI** Ihr gemessener Blutzuckerwert ist höher als 33,3 mmol/l!
- LO** Ihr gemessener Blutzuckerwert liegt unter 1,1 mmol/l!
- HI** (Blinkend) Ihr gemessener  $\beta$ -Ketonwert ist höher als 8 mmol/L!
- LO** (Blinkt) Es ist keine Aktion erforderlich. Ihr gemessener  $\beta$ -Ketonwert liegt unter 0,1 mmol/l, was normal ist.

**ACHTUNG!** Wenn HI oder LO auftritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie Ihre Behandlung ändern. Wenn HI oder LO wiederholt angezeigt wird, obwohl Ihre Blutzuckerwerte nicht hoch oder niedrig sind, wenden Sie sich an den Kundendienst.

**Kundendienst** : 040-32 12 70 info@menariniagnostics.se

**GlucoMen®**  
**areo 2K**



2017-10 GlucoMen Areo 2K Quick guide A4 - DE

[www.areo.nu](http://www.areo.nu)  
[shop.menariniagnostics.se](http://shop.menariniagnostics.se)