

راهنمای سریع

GlucoMen® (areo)




نظارت بر گلوکوز خون با استفاده از بیسیم

A.MENARINI
diagnostics

چه طور می‌توانید گلوکوز خون خود را اندازه گیری کنید.

- زمان و تاریخ دستگاه از قبل در دستگاه تنظیم شده اند، اما شما نیز هنگامیکه بار اول از دستگاه استفاده می‌کنید خود را مطمئن سازید که آنها درست تنظیم شده اند.
- دستان خود را با آب و صابون بشویید.
- یک سوزن تست را از قطی آن برداشته و پوش آن را فوراً بردارید.
- طرف فلزی سوزن را به سوراخ دستگاه داخل کنید.
- هنگامیکه دستگاه برای اندازه گیری آماده شد، علامت قطره خون را روی نمایشگر خود نشان می‌دهد.
- توسط یک سوزن تست یک نمونه خون بگیرید.
- قطره خون را در سر کوتاه سوزن قرار دهید، دستگاه مقدار لازم خون را به داخل خود می‌مکد. شما بعداً یک صدا می‌شنوید و نمایشگر به شمارش آغاز می‌کند.
- نتیجه تست را بخوانید. بعد از اینکه نتیجه بالای نمایشگر نشان داده شد (در صورتیکه دستگاه فعال باشد) شما یک صدا را می‌شنوید.
- برای اینکه سوزن استفاده شده دور کنید، دکمه سوزن پُران را فشار دهید. دستگاه به صورت خود کار خاموش می‌شود.

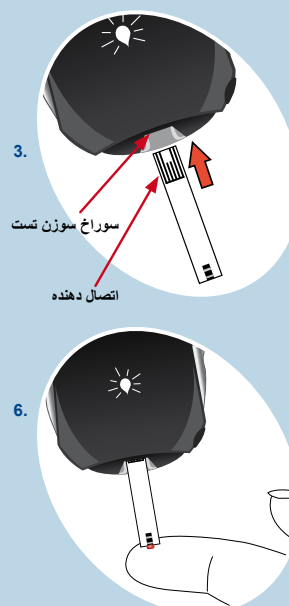

چه طور می‌توانید اندازه گیری های خود را ثبت کنید.

- بعد از اینکه نتیجه تست نمایش داده شد، دکمه را فشار ۱ داده نگهدارید تا علامات ثبت ظاهر شوند. از دکمه های تیرک دار (▲▼) برای ثبت علامات مورد نظر استفاده کنید (قبل از غذا)، (بعد از غذا)، (تمرین) یا (عمومی).
- با فشار دادن دکمه ۱ خود را از ثبت علامات مطمئن سازید. با تکرار مراحل 1 و 2 شما می‌توانید چندین نوع علامت را ثبت کنید (اما در یک زمان یکی از آن هارا ۱ می‌توانید انتخاب کنید).

چه طور زمان و تاریخ را تنظیم می‌کنید

- مطمئن شوید که دستگاه خاموش است. (در غیر آن دکمه را به مدت 3 ثانیه فشار دهید).
- برای ظاهر شدن لست تنظیم آن را به مدت 4 ثانیه فشار داده نگهدارید.
- برای تغییر ▲ لست ▼ تنظیمات آنرا فشار ۱ داده نگهدارید تا لست بتوانید لست های مختلف را بخوانید.
- استفاده ▲ یا ▼ انتخاب اندازه. برای تثبیت و رفتن به مرحله بعدی آن را فشار ۱ داده نگهدارید: سال، ماه، روز، فرمت زمان، ساعت، دقیقه.
- بعد از اینکه دقیقه ها را تنظیم کردید (با فشار ۱ دادن دکمه) شما به لست تنظیمات می‌روید.

طریقه خواندن نتایج موجود در حافظه

- دستگاه شما تا 730 نتیجه را به شمول زمان و تاریخ آن در حافظه خود حفظ می‌کند.
- مطمئن شوید که دستگاه خاموش است. (در غیر آن دکمه را ۱ به مدت 3 ثانیه فشار دهید).
- دکمه را دو دقیقه فشار دهید ۱ تا دستگاه روشن شود ("mem" در نمایشگر نمایان می‌شود).
- آخرین نتایج تست با تاریخ و زمان خود ظاهر می‌شود.
- برای دیدن معلومات حافظه دکمه را فشار داده ▲ و ▼ آنرا جستجو کنید.
- برای خاموش ساختن دستگاه آنرا به مدت بیشتر از 3 ثانیه فشار داده نگهدارید.
- نمایش اوسط نتایج 1، 7، 14، 30، و 60 روزه.**
- دکمه دستگاه ۱ را برای 2 ثانیه فشار داده نگهدارید تا روشن شود. دوباره فشار ۱ دهید (دستگاه "AVG" یا اوسط را نشان می‌دهد). دستگاه اوسط همان روز را نشان می‌دهد.
- برای نمایش اوسط 1، 7، 14، 30، و 60 روزه دکمه را فشار داده ۱ ادامه دهید.
- برای خاموش ساختن دستگاه آنرا به مدت بیشتر از 3 ثانیه فشار داده ۱ نگهدارید.

GlucoMen® (areo)




چه طور میتوانید گلوکوز خون خود را اندازه گیری کنید.

1. زمان و تاریخ دستگاه از قبل در دستگاه تنظیم شده اند، اما شما نیز هنگامیکه بار اول از دستگاه استفاده میکنید خود را مطمئن سازید که آنها درست تنظیم شده اند.
2. دستان خود را با آب و صابون بشویید.
3. یک سوزن تست را از قطی آن برداشته و پوش آن را فوراً بردارید.
4. طرف فلزی سوزن را به سوراخ دستگاه داخل کنید.
5. هنگامیکه دستگاه برای اندازه گیری آماده شد، علامت قطره خون را روی نمایشگر خود نشان میدهد.
6. توسط یک سوزن تست یک نمونه خون بگیرید.
7. قطره خون را در سر کوتاه سوزن قرار دهید، دستگاه مقدار لازم خون را به داخل خود میمکد. شما بعداً یک صدا میشنوید و نمایشگر به شمارش آغاز میکند.
8. نتیجه تست را بخوانید. بعد از اینکه نتیجه بالای نمایشگر نشان داده شد (در صورتیکه دستگاه فعال باشد) شما یک صدا را میشنوید.
9. برای اینکه سوزن استفاده شده دور کنید، دکمه سوزن پُران را فشار دهید. دستگاه به صورت خود کار خاموش میشود.

چه طور میتوانید اندازه گیری های خود را ثبت کنید.


1. بعد از اینکه نتیجه تست نمایش داده شد، دکمه را فشار دهید تا علامت ثبت ظاهر شوند. از دکمه های تیرک دار (▲▼) برای ثبت علامت مورد نظر استفاده کنید (قبل از غذا)، (بعد از غذا)، (تمرین) یا (عمومی).
2. با فشار دادن دکمه (✓) خود را از ثبت علامت مطمئن سازید. با تکرار مراحل 1 و 2 شما میتوانید چندین نوع علامت را ثبت کنید (اما در یک زمان یکی از آن ها را نمیتوانید انتخاب کنید).

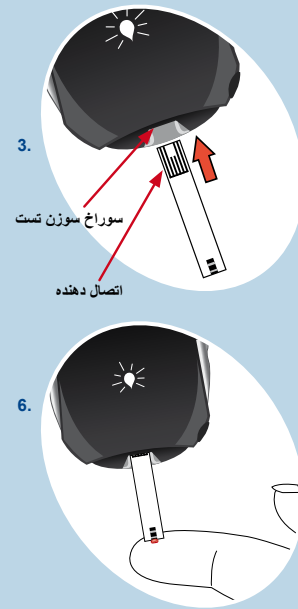


شما چگونه میتوانید از دستگاه گلوکوکیت دو ال پلس (GlucoJectDualPLUS) استفاده کنید

احتیاط! هرگز از سوزن برای بیشتر از یک نفر استفاده نکنید. برای هر تست از سوزن جدید استفاده کنید و بعد از ختم تست سوزن را در سوزن گیر نگذارید.


4. برای بستن دستگاه دسته آن را بیرون بکشید. دستگاه را به ناخن خود چسبانیده دکمه آزاد را فشار دهید.

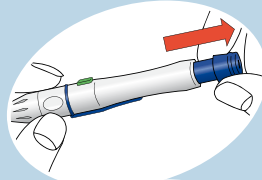


5. برای بیرون کردن سوزن استفاده شده، سوزن پُران را با شصت خود به پیش فشار دهید و دسته لغزنده بیرون بکشید.

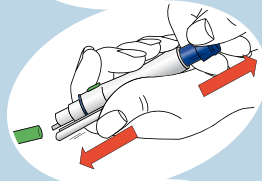


- تست کردن (مکان تست) دستگاه را در محل تست فشار داده نگهدارید. برای چند ثانیه همانطور نگهدارید، بعد برای گرفتن نمونه خون دکمه آزاد را فشار دهید.

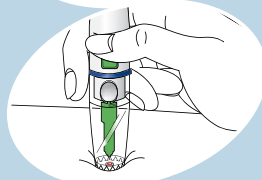


1. دست های خود و جاهای مختلف تست شونده را بشویید. با پیچاندن سرپوش زیرین در جهت مخالف عقربه ساعت آنرا باز کنید.

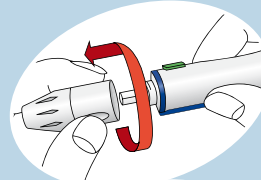

2. یک سوزن جدید ضد عفونی شده را در سوزن گیر قرار داده محکم فشار دهید.

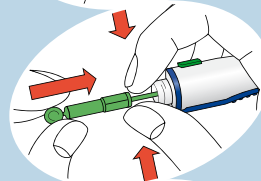

3. با چرخاندن نوک آن عمق فرو رفتن آن را تعیین کنید. 2-1 برای پوست های نرم، 3 برای پوست های معمولی، 5-4 برای پوست های ضخیم و سخت.

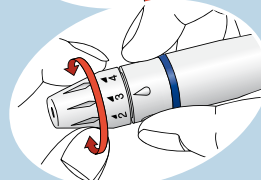

کود های خطا و پیام ها

- ER 1** خطای سخت افزاری سیستم. بطری را بیرون آورده و دوباره ببندید و تست را با یک سوزن جدید تکرار کنید. اگر خطا هنوز باقی بود، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- ER 2** سوزن تست آسیب دیده یا از آن استفاده شده است و یا اینکه به خاطر نمونه خونی که پیش از این گرفته شده است، علامت قطره خون در نمایشگر مشاهده میشود. تست را با استفاده از یک سوزن جدید تکرار کنید.
- ER 3** مقدار خون در سوزن تست کافی نیست. تست را با یک سوزن جدید تکرار کنید تا مقدار کافی خون به دست آورید.
- ER 4** در جریان تست، سوزن تست بیرون آورده شده یا حرکت داده شده است. تست را با یک سوزن جدید تکرار کنید.
- ER 5** عمل انتقال (NFC) قطع شده است. عمل انتقال (NFC) را دوباره ادامه دهید. در صورتیکه مشکل ادامه داشته باشد، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- HI** نتیجه تست شما بیشتر از 33,3 mmol/L ملی مول/لیتر است!
- LO** نتیجه تست شما کمتر از 1,1 mmol/L ملی مول/لیتر است!
- احتیاط!** در صورتیکه خطای HI یا LO را مشاهده کردید قبل از هرگونه اقدامی با دکتر خود تماس بگیرید. در صورتیکه گلوکوز خون شما نه بالا و نه پایین باشد، و دستگاه شما همواره خطای HI یا LO را نشان دهد، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

خدمات مشتریان: 040-32 12 70 info@menarinidiagnostics.se

GlucoMen[®]
areo



2016-04-01 GlucoMen areo

لطفاً به خاطر داشته باشید! این متن یک راهنمای خلاصه است. برای دریافت معلومات بیشتر میتوانید از کتابچه راهنمای همراه دستگاه استفاده کنید.